

| explorē 8

Manuale Utente



SOMMARIO

CAPITOLO 1 – PANORAMICA DEL PRODOTTO	4
INTRODUZIONE	4
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	5
PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE explorē 8	7
CAPITOLO 2 – USO DEL SISTEMA.....	9
ACCENSIONE	9
SPEGNIMENTO	9
MODALITA' INGRANDIMENTO	9
AUMENTARE E DIMINUIRE L'INGRANDIMENTO.....	10
MODIFICARE IL CONTRASTO.....	10
ACCENDERE E SPEGNERE LE LUCI	10
RIGHE E BANDE.....	11
AUTOFOCUS	11
CATTURARE UN'IMMAGINE.....	11
INGRANDIRE E DIMINUIRE LE IMMAGINI ACQUISITE	12
MODALITA' GALLERIA.....	12
VISUALIZZARE LE IMMAGINI NELLA GALLERIA	12
CANCELLARE LE IMMAGINI DALLA GALLERIA	13
USARE UNO SCHERMO ESTERNO.....	13
CAPITOLO 3 – ESPORTARE LE IMMAGINI SU COMPUTER	14
CAPITOLO 4 – MENU.....	15
ACCEDERE, SPOSTARSI E MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI	15

CAPITOLO 5 – AGGIORNARE explorē 8	17
CAPITOLO 6 – RICARICARE explorē 8	18
CAPITOLO 7 – RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	20
APPENDICE A – ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	22
APPENDICE B – CARATTERISTICHE TECNICHE	24
APPENDICE C – NORMATIVE FCC	25
APPENDICE D – GARANZIA.....	27

CAPITOLO 1 – PANORAMICA DEL PRODOTTO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato HumanWare explorē 8, un ingranditore elettronico portatile, leggero e facile da utilizzare, con un ampio schermo da 8 pollici per una lettura più rapida e confortevole.

Essendo noi stessi utilizzatori di lenti d'ingrandimento, noi di HumanWare sappiamo che oltre alla migliore qualità d'immagine disponibile, una buona lente d'ingrandimento deve essere semplice, portatile, comoda da usare e deve essere sempre pronta quando serve, dove serve. L'explorē 8 è stato progettato proprio con questo obiettivo, perché siamo molto orgogliosi di offrirvi un prodotto di qualità che soddisfi le vostre esigenze e le vostre aspettative.

Leggete attentamente le istruzioni operative e sulla sicurezza che trovate in questo Manuale Utente prima di usare il dispositivo. Se avete delle domande sul dispositivo, contattate l'Assistenza Clienti di HumanWare. I riferimenti per l'Assistenza si trovano sul retro di questo Manuale.

Copyright 2019 di Technologies HumanWare Inc., tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o distribuita in nessuna forma, o memorizzata su database o sistemi di recupero, senza autorizzazione scritta da parte di Technologies HumanWare Inc.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Videoingranditore explorē 8
- Alimentatore USB
- Cavo USB
- Cavo HDMI
- Manuale Utente
- Custodia
- Panno in microfibra

CONTENUTO KIT ADDIZIONALE


- Stativo pieghevole per explorē 8
- Borsa di trasporto

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO


Parte Frontale

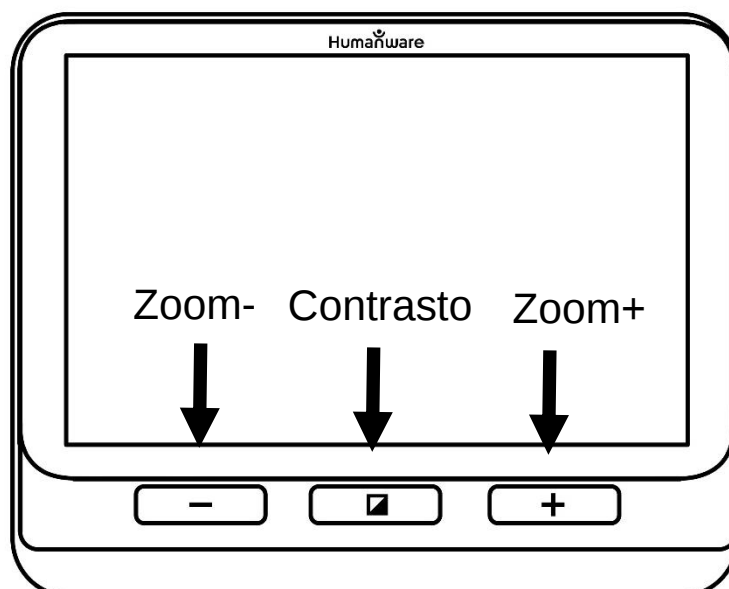


Lato sinistro

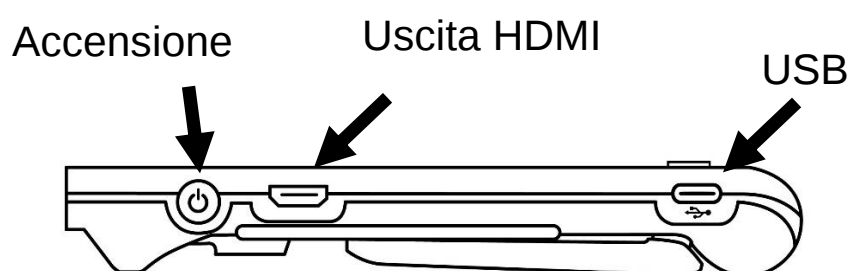

Parte superiore

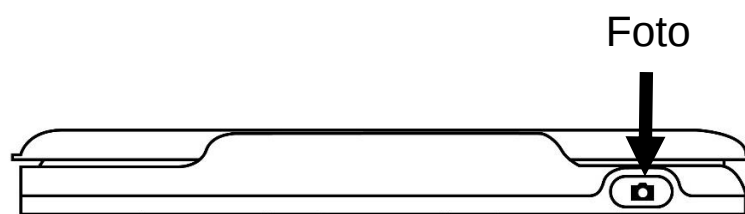

Parte posteriore

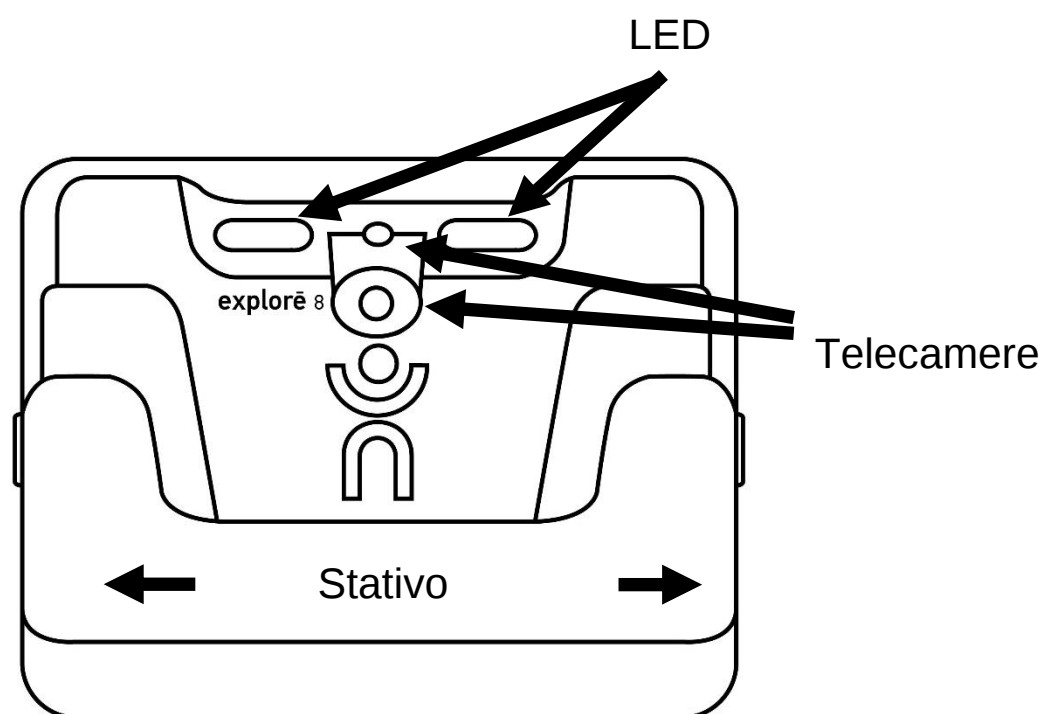


USARE LO STATIVO PIEGHEVOLE (OPZIONE KIT ADDIZIONALE)


Quando viene utilizzato con il suo supporto pieghevole, **explorē 8** si alza sopra il tavolo, lasciando ampio spazio per la scrittura.

Aprire il supporto pieghevole (opzionale), quindi infilare il dispositivo nel supporto per utilizzarlo in “modalità stand”. (vedere le immagini 1 e 2 del supporto pieghevole).

Una volta terminato il lavoro in “modalità stand”, estrarre il dispositivo dal supporto con il movimento inverso.

Per ottimizzare la “Modalità stand”, consultare le regolazioni delle impostazioni riportate nella Sezione 4.

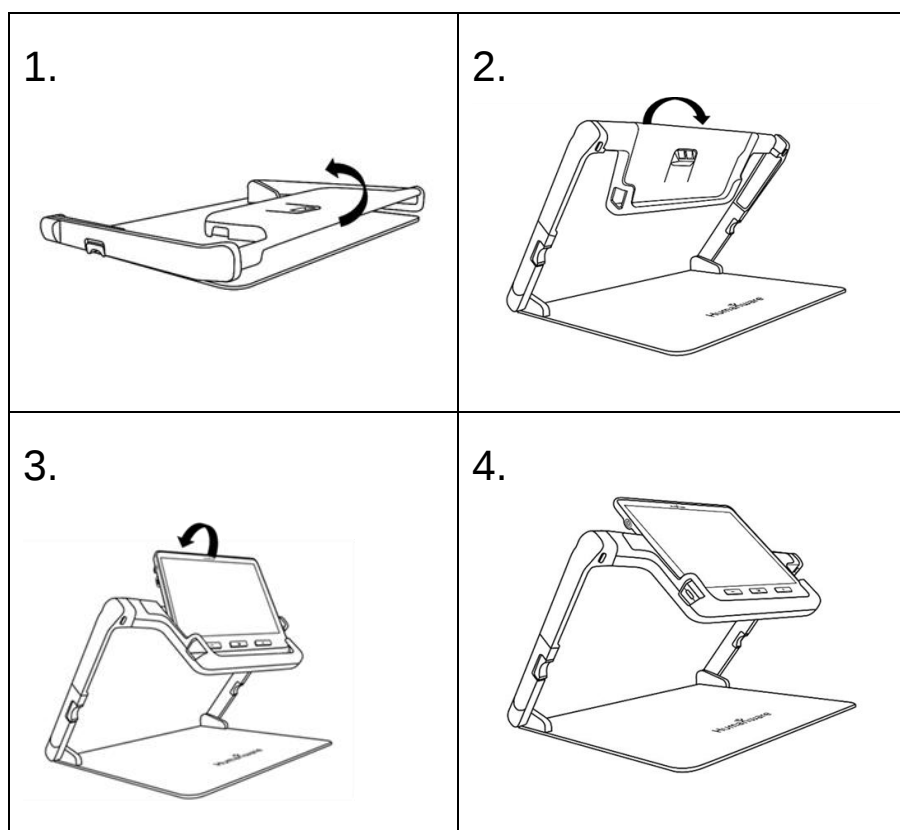

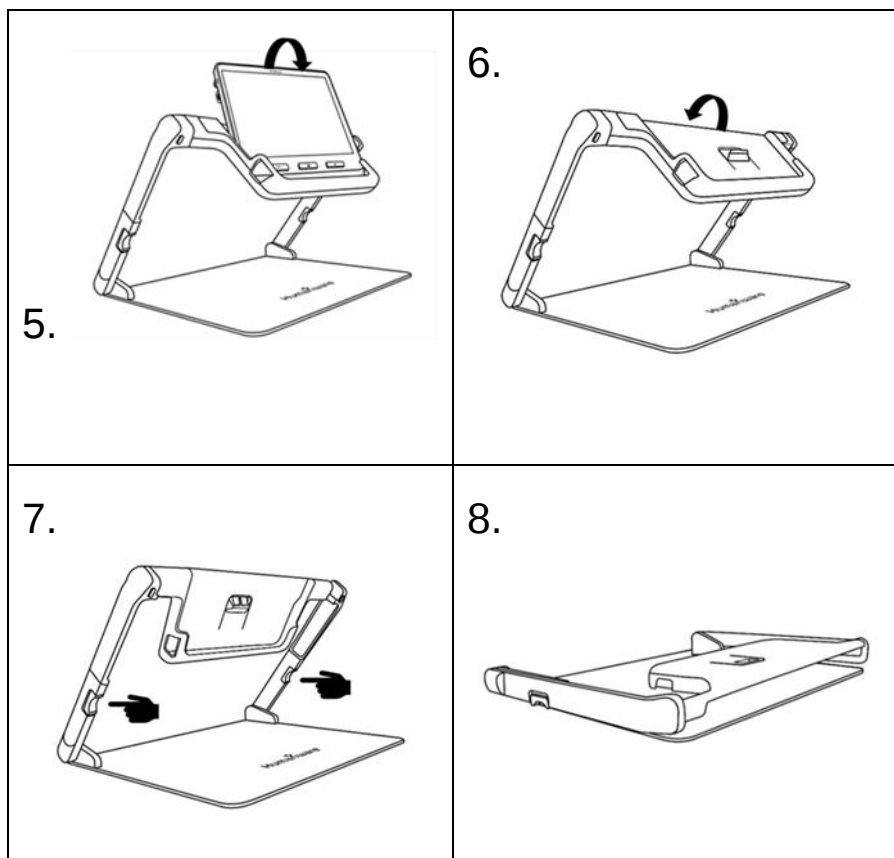

PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE EXPLORÈ 8

1. Collegare il cavo USB all'alimentatore.
2. Tenere explorè 8 in modo che lo schermo sia rivolto verso di sé. Assicurarsi che il simbolo in rilievo della porta USB sul cavo sia rivolto verso il basso. Collegare il cavo alla porta USB sul lato sinistro del dispositivo e collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.

IMPORTANTE: fare attenzione quando si inserisce il cavo nella porta USB.


3. Lasciare il dispositivo collegato fino a che la batteria sia completamente carica. Durante la ricarica il dispositivo diventa più caldo, ma è normale.
4. Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare delicatamente il cavo di alimentazione.
5. Premere il **pulsante di Accensione** o aprire lo stativo per la lettura per iniziare ad usare il dispositivo.

CAPITOLO 2 – USO DEL SISTEMA

ACCENSIONE

Per accendere il videoingranditore, premere il **pulsante di Accensione** sul lato sinistro del dispositivo. Si può maneggiare come se fosse un tablet.

In alternativa, è possibile accenderlo aprendo lo stativo per la lettura, sul retro del dispositivo, posizionando quest'ultimo sul materiale da leggere.

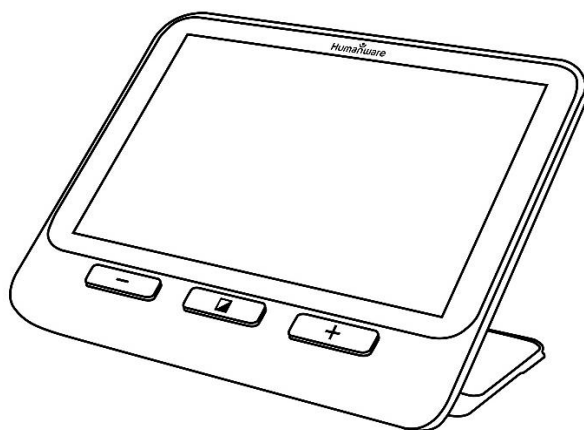

Dopo qualche secondo, si accenderà lo schermo di explorē 8, che mostrerà l'immagine della telecamera. Questa è la modalità Ingrandimento.

SPEGNIMENTO

Per spegnere il dispositivo, premere nuovamente il **pulsante di Accensione**.

MODALITA' INGRANDIMENTO

La modalità Ingrandimento è la modalità operativa principale di explorē 8. Con lo stativo chiuso, sarà possibile ingrandire gli oggetti ad una certa distanza. Con lo stativo aperto, sarà possibile ingrandire gli oggetti o i documenti vicini, posti su un tavolo.

AUMENTARE E DIMINUIRE L'INGRANDIMENTO

Per ingrandire, premere o tenere premuto il pulsante **Zoom+** fino ad arrivare alla dimensione desiderata. Allo stesso modo, è possibile diminuire l'ingrandimento premendo o tenendo premuto il pulsante **Zoom-** fino a raggiungere la dimensione desiderata.

In alternativa, è possibile abilitare la funzione **pinch & zoom** dal menu (diminuire e aumentare la distanza tra due dita) per aumentare e diminuire l'ingrandimento di un'immagine dal vivo (vedi capitolo 4).

MODIFICARE IL CONTRASTO

explorē 8 permette di personalizzare il contrasto per meglio rispondere alle esigenze dell'utente. Premere il Pulsante **Contrasto** per modificare il contrasto fino a quando trovate quello più adatto a voi.

Le Modalità **Contrasto** disponibili sono le seguenti:

- Colori reali, Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero

Ci sono anche altre Modalità disponibili (vedi capitolo 4):

- Nero su arancione, Arancione su nero, Nero su ciano, Ciano su nero, Nero su viola, Viola su nero, Nero su verde, Verde su nero, Blu su giallo, Giallo su blu, Bianco su blu, Blu su bianco, Rosso su bianco, Bianco su rosso, Rosso su nero, Nero su rosso

ACCENDERE E SPEGNERE LE LUCI

Premere e tenere premuti Zoom+ e Zoom- simultaneamente per spegnere le luci e per riaccenderle quando necessario.

RIGHE E BANDE

Con explorē 8, è possibile aggiungere una riga orizzontale o nascondere parte dell'immagine per facilitare la lettura.

Per aggiungere o rimuovere una riga, premere e tenere premuti i pulsanti **Contrasto e Zoom+** simultaneamente.

Per aggiungere o rimuovere le bande, premere e tenere premuti i pulsanti **Contrasto e Zoom-**.

AUTOFOCUS

explorē 8 è dotato di autofocus che può essere impostato dal menu su **Bloccato**, **Sbloccato** o **Manuale** (vedi capitolo 4).

Quando l'autofocus è impostato su **Sbloccato** (default), explorē 8 regolerà dinamicamente la messa a fuoco in base all'oggetto visualizzato al momento. La messa a fuoco può essere forzata toccando una parte qualunque dello schermo.

Quando l'autofocus è impostato su **Bloccato**, oppure se usate l'ingranditore su un tavolo, explorē 8 manterrà la messa a fuoco indipendentemente da qualsiasi spostamento o modifica.

Quando l'autofocus è impostato su **Manuale**, è possibile toccare una parte qualsiasi dello schermo affinché explorē 8 attivi il focus su quella posizione in particolare. L'impostazione **Manuale** funziona solo in Modalità a Distanza. La Modalità da Tavolo continuerà ad essere bloccata anche se è selezionata la modalità **Manuale**.

CATTURARE UN'IMMAGINE

explorē 8 consente di acquisire un'immagine in Modalità Ingrandimento per facilitare la lettura, una funzione particolarmente utile quando si devono leggere le etichette dei prodotti sugli scaffali dei negozi. Per catturare un'immagine, premere il pulsante **Foto** indirizzando la telecamera verso l'oggetto da leggere.

L'immagine sarà visualizzata sullo schermo fino a quando deciderete di tornare alla Modalità Ingrandimento.

Per ritornare alla Modalità Ingrandimento, premere nuovamente il pulsante **Foto**.

INGRANDIRE E DIMINUIRE LE IMMAGINI ACQUISITE

Per ingrandire le immagini acquisite, premere o tenere premuto il pulsante **Zoom+** fino a raggiungere la dimensione desiderata. Allo stesso modo, è possibile diminuire l'ingrandimento delle immagini acquisite premendo e tenendo premuto il pulsante **Zoom-** fino ad ottenere la dimensione dell'immagine desiderata.

In alternativa, è possibile abilitare la funzione da menu **pinch & zoom** (aumentare e diminuire la distanza tra due dita) per aumentare o diminuire l'ingrandimento (vedi capitolo 4).

Tenere il dito sullo schermo e spostarlo per vedere le altre parti dell'immagine acquisita.

Come per l'immagine dal vivo, premere **Contrasto** per modificare il contrasto fino a trovare quello desiderato.

MODALITA' GALLERIA

Per salvare un'immagine dal vivo o acquisita in Galleria, premere e tenere premuto il tasto **Foto** per mezzo secondo mentre siete in modalità Ingrandimento. A schermo apparirà per qualche istante "Salvataggio" ad indicare che l'immagine è stata salvata nella Galleria di explorē 8.

In alternativa, è possibile abilitare la funzione **Tocco & Pressione** (mantenere il dito sullo schermo) da menu per salvare un'immagine in Galleria (vedi capitolo 4).

VISUALIZZARE LE IMMAGINI NELLA GALLERIA

Per accedere alle immagini nella Galleria, premete **Contrasto** e **Foto** simultaneamente. Far scorrere il dito a sinistra o a destra sullo schermo

per selezionare un'immagine. È possibile fare questa operazione anche usando le frecce a schermo.

È possibile aumentare o diminuire l'ingrandimento delle immagini salvate premendo o tenendo premuto **Zoom+** e **Zoom-**. In alternativa, è possibile abilitare la funzione **pinch & zoom** (diminuire e aumentare la distanza tra due dita) dal menu per aumentare o diminuire l'ingrandimento dell'immagine salvata (vedi capitolo 4).

Per uscire dalla Galleria e ritornare alla modalità Ingrandimento, premere **Indietro** (a schermo) o premere e tenere premuto **Contrasto**.

CANCELLARE LE IMMAGINI DALLA GALLERIA

Per eliminare un'immagine dalla Galleria, entrare nella Galleria e spostarsi all'immagine da eliminare (scorrere con il dito a sinistra o a destra sullo schermo o usare le frecce) e tenere premuto **Foto**. Scegliere quindi **Eliminare**

In alternativa, è possibile abilitare nel menu la funzione **Tocco & Pressione** (mantenere il dito sullo schermo) per eliminare un'immagine (vedi cap. 4).

Le scelte sono **Eliminare** e **Annullare**. Premere **Eliminare** per confermare la cancellazione dell'immagine. Per annullare l'operazione, premere **Annullare** o **Contrasto**.

È possibile eliminare tutte le immagini in una volta dal menu (vedi capitolo 4). Premere e tenere premuto **Contrasto** per aprire il Menu e selezionare l'opzione **Elimina Galleria**.

USARE UNO SCHERMO ESTERNO

Per avere un'immagine più grande, è possibile visualizzare il contenuto di explorē 8 su uno schermo esterno (per esempio la TV). Per farlo, collegare explorē 8 ad uno schermo esterno tramite cavo HDMI. Consultare l'appendice B per l'elenco dei formati video supportati in uscita.

CAPITOLO 3 – ESPORTARE LE IMMAGINI SU COMPUTER

Per esportare le immagini salvate in Galleria sul proprio computer, collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione. Sul dispositivo dovrebbe apparire il messaggio “PC collegato”. Ora è possibile copiare e incollare le immagini dalla Galleria al computer usando Esplora file sul computer.

Quando è collegato a un personal computer, il dispositivo si comporta esattamente come una chiavetta USB o un drive esterno. Le immagini della Galleria si trovano nella cartella Immagini del vostro explorē 8.

Quando si stanno copiando o cancellando immagini dal dispositivo, non scollegare mai il cavo USB, perchè alcune immagini potrebbero essere perse.

CAPITOLO 4 – MENU

ACCEDERE, SPOSTARSI E MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI

Premete e tenete premuto il Pulsante **Contrasto** per entrare nel menu. È possibile spostarsi nel menu facendo scorrere il dito su e giù sullo schermo, oppure premendo le frecce su/giù sullo schermo, oppure premendo **Zoom+** per scorrere verso l'alto o **Zoom-** per scorrere verso il basso.

Per selezionare un elemento, toccatelo. Per tornare al menu precedente, premete **Contrasto** o **Indietro**. Premete ancora **Contrasto** per tornare alla modalità Ingrandimento. Per uscire dal menu, premete e tenete premuto **Contrasto** o **Indietro**.

Il menu contiene gli elementi seguenti:

- **Galleria** (per accedere alle immagini della Galleria)
- **Autofocus**: Sbloccato*, Bloccato (Bloccato* in modalità stativo), Manuale (Bloccato in modalità stativo)
- **Luminosità dello schermo** (cambia il livello di luminosità dello schermo): da 1 a 9 (8*)
- **Touchscreen** (sottomenu, toccare per abilitare gesture e vibrazioni)
 - **Pinch & zoom** (diminuire/aumentare la distanza tra due dita per diminuire/aumentare l'ingrandimento)
 - **Vibrazione**
 - **Tocco & pressione** (tenere il dito premuto sullo schermo in modalità Ingranditore per salvare l'immagine in Galleria)
 - **Blocco temporaneo della messa a fuoco** (interruttore) (On*)
Disponibile solo quando si utilizza il supporto pieghevole opzionale. Quando è attivata, toccare due volte lo schermo con un dito per bloccare la messa a fuoco nello stato attuale. Questa funzione impedisce al dispositivo di rimettersi a fuoco, consentendo di eseguire operazioni come la firma di documenti senza rimettere continuamente a fuoco la fotocamera. Toccare due volte con un dito per disattivare la funzione.

- **Panoramica dell'immagine (interruttore) (Off*)** Utilizzabile solo con il supporto pieghevole opzionale. Il gesto “Panoramica” con due dita è disponibile in modalità di visualizzazione dei documenti: Posizionare due dita vicino alla parte superiore dello schermo e farle scorrere verso il basso mantenendo il contatto con lo schermo. La visualizzazione viene ingrandita a 1x. In questo modo è possibile orientare l'area ingrandita sullo schermo. Rimuovere entrambe le dita dallo schermo per tornare al livello di zoom precedente.
- **Interruttore (Off*)** Deve essere impostato su On per utilizzare explorē 8 sul suo supporto pieghevole opzionale. Utilizzare l'icona “T” (testo) sul supporto pieghevole per visualizzare gli elementi mentre si utilizza il supporto o toccare l'icona della montagna e rimuovere il dispositivo per la visualizzazione a mano o a distanza (le icone sono visualizzate in alto a sinistra dello schermo)
- **Auto-spegnimento** (imposta per quanto tempo resta acceso il dispositivo senza usarlo): 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti*, 10 minuti, mai.
- **Zoom preferito** (cambia l'ingrandimento predefinito quando aprite il dispositivo): Precedente (l'ingrandimento che avevate quando avete chiuso il dispositivo), da 2x* a 30x
- **Contrasto** (sottomenu)
 - **Contrasto Preferito** (selezionate il contrasto con il quale si avvierà explorē 8): Precedente* (ultimo contrasto utilizzato), Colore, contrasti abilitati
 - **Menu** (modifica colori menu): Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su Blu, Bianco su Blu, Blu su Bianco, Rosso su Bianco, Bianco su Rosso, Rosso su Nero, Nero su Rosso
 - **Contrasto Attivato** (seleziona le coppie di colore per la Modalità Ingrandimento): Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su

Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su blu, Bianco su blu, Blu su Bianco, Rosso su Bianco, Bianco su Rosso, Rosso su Nero, Nero su Rosso

- **Linea e Bande:** Nessuna*, Linea, Bande
- **Luci:** Acceso*, Basso, Spento
- **Dimensione testo nel menu:** Piccolo, Medio*, Grande
- **Lingua:** Inglese (US)*, Inglese (UK), Francese, Spagnolo, Tedesco, Olandese, Danese, Polacco, Portoghese (Portogallo), Portoghese (Brasile), Norvegese (Bokmål), Italiano, Svedese, Finlandese, Russo, Ceco, Giapponese, Coreano, Islandese, Estone, Turco, Lituano, Ungherese, Lettone, Arabo, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Ebraico, Georgiano, Farsi, Kurdo
- **Schermo:** 50Hz , 60Hz*
- **Elimina Galleria**
- **Impostazioni predefinite**
- **Informazioni su** (Visualizza informazioni sul dispositivo): Data e ora, Software, Hardware, Numero di serie

CAPITOLO 5 – AGGIORNARE EXPLORÈ 8

Collegarsi alla pagina:

<http://support.humanware.com/en-canada/support/explore>

e scaricare l'ultima versione del software per explorè 8. Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB in dotazione. Tramite Esplora file sul computer, incollare il file scaricato direttamente nella cartella principale di explorè 8. Una volta completato il trasferimento, scollegare il cavo USB dal computer. Avviare explorè 8. Il dispositivo si dovrebbe aggiornare automaticamente.


CAPITOLO 6 – RICARICARE EXPLORÈ 8

IMPORTANTE: La batteria si scalda durante la ricarica, ma questo è normale. Non ricaricare la batteria vicino ad una fonte di calore.

Per ricaricare la batteria tramite presa di corrente:

- Collegare il cavo di ricarica USB all'alimentatore di explorè 8. Poi, collegare il cavo di ricarica USB all'ingranditore e l'alimentatore ad una presa di corrente.
- Lasciare il dispositivo collegato fino a quando la batteria è completamente carica. Un dispositivo completamente scarico dovrebbe impiegare circa 3,5 ore per ricaricarsi.

Durante la procedura di ricarica, apparirà per qualche istante l'immagine qui sotto, ma anche quando accendete il dispositivo.

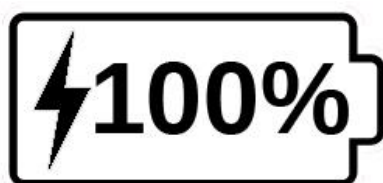

Questa icona indica che il dispositivo è in carica. Il numero rappresenta la percentuale di ricarica.

A causa del basso voltaggio, la ricarica dalla porta USB del PC potrebbe essere più lenta. In alcuni casi, il videoingranditore potrebbe non essere in grado di ricaricarsi in base alla quantità di energia fornita dal computer. Il modo più efficace per ricaricare il dispositivo consiste nell'usare il cavo USB in dotazione, collegato all'alimentatore.

Anche se potrebbe allungare i tempi di ricarica, il dispositivo può essere usato anche quando è collegato alla corrente.

Bisogna tenere presente che, se la batteria è completamente scarica o se il dispositivo non viene usato da molto tempo, potrebbe esserci un ritardo di qualche minuto prima che il dispositivo mostri una qualsiasi attività.

Notate anche che, come per tutti i dispositivi elettronici, explorē 8 si scalderebbe durante l'uso o quando è in carica.

Precauzioni di sicurezza per la batteria:

- Non disassemblare o modificare la batteria.
- Usare solo l'alimentatore fornito da HumanWare.

Potrebbe verificarsi un rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione se la batteria venisse a contatto con il fuoco, se fosse riscaldata, se fosse soggetta a urti, messa a contatto con l'acqua, o se i suoi terminali andassero in corto circuito.

CAPITOLO 7 – RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

explorē 8 non si accende:

Premere e tenere premuto il **Pulsante di accensione**. Se il dispositivo non si accende ancora, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria.

Collegare il cavo USB in dotazione con l'alimentatore ad una presa di corrente o il solo cavo USB alla porta USB di un computer acceso. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario qualche minuto prima che il dispositivo mostri segni di attività (vedi capitolo 6).

Lo schermo è nero:

Se l'unità si trova su un tavolo o su qualsiasi superficie piana, l'immagine potrebbe non essere visibile. Sollevare l'ingranditore per vedere se questo è il motivo per cui lo schermo è nero.

Se questo non resolvesse il problema, provare a riavviare il dispositivo.

L'immagine è sfocata in Modalità Ingrandimento:

Assicurarsi che l'autofocus sia impostato su Sbloccato nel menu. Spostare il dispositivo sul documento che si sta visualizzando avanti e indietro. Questa operazione farà sì che explorē 8 rimetta a fuoco il documento.

explorē 8 si spegne dopo un periodo di inattività:

Questo è il comportamento normale per preservare la batteria. Di default, explorē 8 si spegnerà dopo 5 minuti di inattività. È possibile configurare il tempo di spegnimento automatico predefinito tra 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti o Mai.

I colori sono difficili da individuare:

Come prima cosa assicurarsi che ci sia luce a sufficienza intorno a sé.

Scegliere una diversa combinazione di colori premendo il Pulsante **Contrasto** mentre si è in Modalità Ingrandimento.

Ci sono molti riflessi:

Spostare l'oggetto che si sta osservando in un'altra direzione per ridurre il riflesso. È possibile anche provare a spegnere le luci premendo e tenendo premuti **Zoom+** e **Zoom-** simultaneamente.

explorē 8 non risponde:

Accertarsi che explorē 8 non sia collegato all'alimentazione attraverso il cavo USB; se lo fosse, scollegarlo. Premere il pulsante di accensione per 10 secondi. Il sistema si spegnerà. Quindi, premere il pulsante di accensione per un secondo per riaccendere explorē 8.

Altri problemi:

Ripristinare le **Impostazioni predefinite** dal menu.

Premere e tenere premuto il pulsante **Contrasto**. Scorrere verso il basso fino a raggiungere **Impostazioni predefinite** e selezionare Sì.

APPENDICE A – ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Non guardare direttamente le luci a LED sul lato posteriore dell'ingranditore.

Restare lontani da acqua o fonti di umidità. Non immergere l'apparecchio nell'acqua.

Spegnere sempre explorē 8 prima di pulirlo.

Usare solo i cavi in dotazione con explorē 8.

Batteria:

explorē 8 ha una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio. La batteria deve essere sostituita da un tecnico autorizzato da HumanWare.

- Non usare/lasciare l'unità vicino a fonti di calore. Non lasciarla esposta ad alte temperature.
- Usare solo alimentatori USB compatibili per caricare la batteria.
- Non disassemblare o modificare l'unità.
- Non immergere l'unità in acqua, evitare che si bagni.
- Evitare che l'unità subisca urti.
- Non usare oggetti appuntiti o oggetti che possano danneggiare l'unità.
- Se la batteria perde del liquido e quest'ultimo viene a contatto con gli occhi, non sfregateli. Piuttosto, bagnateli con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico per prevenire ulteriori infortuni.
- Se la batteria perde del liquido e quest'ultimo viene a contatto con la pelle, bagnare immediatamente con acqua corrente la parte del corpo che è stata a contatto con il liquido per prevenire infortuni.

Pulire lo schermo LCD:

Assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato dalla corrente.

Assicurarsi di usare solo panni in microfibra come quello in dotazione con il dispositivo.

Passare delicatamente il panno sullo schermo LCD.

Se si decide di pulire lo schermo LCD con un detergente liquido, assicurarsi che il detergente sia adatto a pulire gli schermi LCD. L'acqua distillata, l'alcool isopropilico e soluzioni miste acqua-aceto (con non più del 10% di aceto) rientrano tra le soluzioni liquide utilizzabili per gli schermi LCD.

Usare solo una quantità minima di liquido per evitare infiltrazioni all'interno del dispositivo. Le infiltrazioni di liquidi infatti possono danneggiare il dispositivo. Assicurarsi che a schermo non rimangano tracce di liquidi. Ripetere i passaggi precedenti per le macchie più difficili da rimuovere.

Non usare MAI detergenti per la casa per pulire explorē 8.

Non spruzzare MAI direttamente liquidi sullo schermo LCD.

Non usare MAI prodotti per la pulizia che contengano alcool etilico, acido etilico, ammoniaca, acetone o cloruro di metile.

Non usare MAI tovaglioli di carta per pulire lo schermo LCD.

APPENDICE B – CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 24 x 204 x 153.2 mm

Schermo: LCD da 8" ISP

Ingrandimento: da 2x a 30x

Peso: 580 g

Alimentazione in entrata: Connettore USB di tipo C. 5V@3A, 9V@2A o 12V@1.5A

Autonomia: 4.5 ore

Tempo di ricarica: 2 ore (a dispositivo spento)

Risoluzioni supportate:

1280x720p 60Hz, 50Hz

Nessun supporto in emulazione in DVI

Condizioni operative:

Temperatura: da 10 °C a 40 °C / da 50 °F a 104 °F

Umidità: da 20% a 80%

Condizioni per trasporto e stoccaggio:

Temperatura: da -20 °C a 60 °C / da -4 °F a 140 °F

Umidità: da 10% a 95%

APPENDICE C – NORMATIVE FCC

Dichiarazione FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare delle operazioni indesiderate.

Avviso FCC:

Modifiche non autorizzate al sistema possono invalidare la capacità di usare questo dispositivo da parte dell'utente.

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato soddisfare le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, che seguono la Parte 15 delle normative FCC. Queste limitazioni sono state pensate per dare una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato come da istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione in particolare. Se il prodotto provoca danni alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dall'accensione o dallo spegnimento del dispositivo, l'utente può provare a correggere l'interferenza seguendo una di queste indicazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per avere aiuto.

Nota: questa unità è stata testata con cavi schermati. Per assicurare piena compatibilità, con questo dispositivo dovranno essere usati cavi schermati.

APPENDICE D – GARANZIA

HumanWare garantisce che explorē 8, a partire dalla data di acquisto, è esente da qualsiasi difetto materiale e di manodopera per 2 anni, salvo indicazioni diverse previste dalle leggi in vigore nel paese in cui è stato acquistato.

Questa garanzia non è trasferibile e si applica a tutti i casi dove il danno non è causato da uso improprio, maltrattamento o negligenza. Per uso improprio si intende un uso del prodotto diverso da quello descritto in questo manuale. In nessun caso HumanWare o i suoi distributori saranno ritenuti responsabili per danni indiretti o conseguenti.

Non sarà effettuata nessuna riparazione o sostituzione coperta dalla garanzia a meno che il sistema sia accompagnato da una copia della ricevuta d'acquisto originale. Conservate la ricevuta originale. Se il sistema deve essere rispedito, usate la confezione originale.

Customer support

For customer support, please contact the HumanWare office nearest you or view our Website at:
www.humanware.com

North America: 1 (800) 722-3393
support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com



Assistenza per l'Italia: Voice Systems S.r.l.

tel. (+39) 02 3450989

assistenza@voicesystems.it

ACCD-0186
REV 10